



VÁŽENÁ KLIENTKO / VÁŽENÝ KLIENTE, děkujeme, že jste si vybrali právě **GENLABS** pro svůj genetický test. Vaše důvěra nás těší a zavazuje k pečlivosti a péči, kterou věnujeme každému vzorku.

Jakmile nám jednou předáte svůj vzorek, můžete kdykoliv v budoucnu jednoduše přiojednat další testy, které jednoduše provedeme z již uloženého vzorku. Pro tento případ zaškrtněte v Informovaném souhlasu s genetickým vyšetřením (součást žádanky) také **SOUHLAS SE SKLADOVÁNÍM**.

GENETIKA – VĚDOMÝ KLÍČ K SOBĚ.

ZDE JSOU INSTRUKCE PRO ODESLÁNÍ:

1. Doporučujeme poslat vzorek do laboratoře v den odběru, ideálně na začátku pracovního týdne (pondělí/úterý).
2. Po odběru vložte stěr zpět do **obdržené bublinkové obálky**.
3. Vzorek odešlete pouze spolu s řádně vyplněnou papírovou žádankou, na adresu:

GENLABS s.r.o.
Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice 2

PŘÍJEM VZORKU DO LABORATOŘE A VÝSLEDEK TESTU:

- O příjmu vzorku do laboratoře vás budeme informovat e-mailem.
- Výsledky testu obdržíte také e-mailem.

Důležité informace:

- Sada je jednorázová – používejte pouze neporušenou odběrovou sadu s neporušeným obalem.
- Před odběrem minimálně hodinu nejezte, nepijte ani si nečistěte zuby.
- Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci tamponu cizí DNA.

Krátké instruktážní video pro provedení stěru můžete najít v tomto odkazu:

<https://www.youtube.com/watch?v=4ddtzyF4frc>



GENLABS

GENLABS s.r.o.
Lipová 1789/9
370 05 České Budějovice 2

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ ODBĚROVÉ SADY



ISOHELIX RD-01 BUCCAL SWABS WITH RAPIDRI POUCH

Stěr proveďte nejméně jednu hodinu před jídlem, pitím nebo ideálně ráno po probuzení před vyčištěním zubů.

Bukální stěr nesmí být starší než 48 – 72 hodin.

1

Obal obsahující odběrovou sadu otevřete z pravého konce (označeného černými obdélníčky).

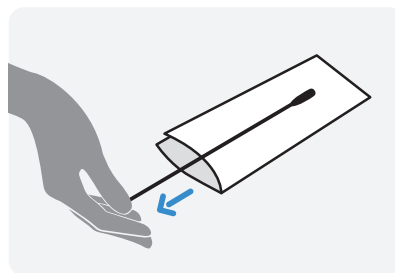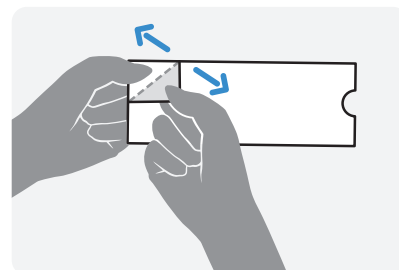


2

Opatrně vyjměte tyčinku s tamponem. Nedotýkejte se bílého tamponu prsty.


3

Vložte si tampon do úst a pevně třete vnitřní ústní dutiny. Tzn. vnitřní strany tváří a pod horním a dolním rtem vnitř úst po dobu 2–3 minut.

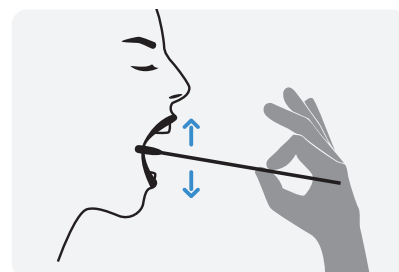

4

Tyčinku s tamponem vložte do speciálního sáčku, tak, aby tampon ležel v sušící oblasti označené jako **Drying Area**. Dbejte, abyste se nedotkli tamponu prsty.

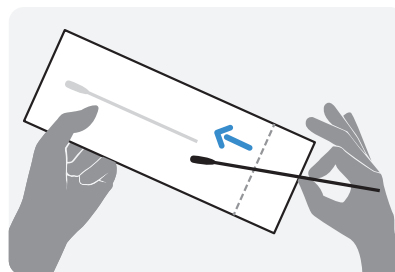

5

Sáček uzavřete tak, jak vidíte na obrázku – na úrovni přerušované čáry – jej přehněte a přelepte čárovým kódem.

